



# Умные Bluetooth весы

Инструкция по  
использованию



0000 kg






### | Вступление

Благодарим вас за покупку весов для ванной комнаты.

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию о безопасности, использовании и утилизации.

Используйте изделие, как описано, и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

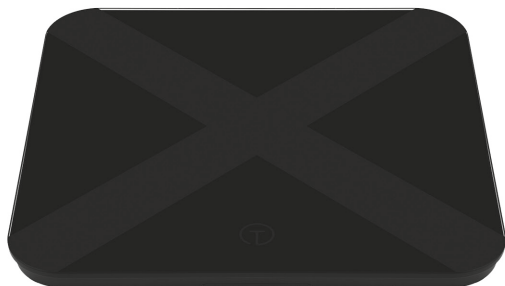



## Инструкции по технике безопасности

Не погружайте весы в воду или другие жидкости

Не ставьте весы на ковры или мягкие поверхности. Размещайте только на твердых и плоских поверхностях.

Не наступайте на весы мокрыми ногами и не используйте весы, если платформа влажная. Влага приведет к тому, что поверхность весов станет скользкой.

Не прыгайте по шкале, так как это может повредить датчики.

Не наступайте на край весов при включении и выключении, так как это может привести к опрокидыванию весов.

При первом использовании весов или при изменении их местоположения их следует включать, выключать и снова включать. Его поверхность также должна быть свободна от каких-либо предметов. Невыполнение этого требования может привести к неточным измерениям.

Всегда храните батарейки в недоступном для младенцев и маленьких детей месте. Использованные батарейки утилизируйте в специально отведенные организации и места.



## Умные Bluetooth весы

---

Очистите весы слегка влажной тканью.  
Не используйте никаких химических/ абразивных  
чистящих средств.

Если вы не собираетесь использовать весы в течение длительного периода времени, извлеките батарейки и храните весы в чистом, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.





## Установка Батареек

**ЧТОБЫ** вставить батарейки, откройте батарейный отсек на задней панели весов и снимите крышку отсека.

Вставьте батарейки типа ААА, обращая внимание на правильную полярность.

### Выберите Устройство перед использованием

1. Подождите, пока не появится «0.01 lb».



2. Нажмите кнопку ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ на задней панели шкалы, чтобы выбрать нужную единицу измерения (kg or lb)



**Примечание:** После выбора единицы измерения поместите шкалу на твердую и плоскую поверхность и начните измерение, как описано ниже. Весы автоматически отключатся через 8 секунд бездействия.



## Повторная калибровка шкалы

Перед взвешиванием выполните повторную калибровку весов, если весы были физически перемещены или батарейки были заменены.

**Указания:** Встаньте на весы, подождите, пока дисплей включится, затем сойдите. Подождите, пока весы автоматически опустятся до 0. Og/O. Olb, затем вернитесь на весы и начните взвешивание.




# Измерение (ед. измерения фунты)

1. Поместите весы на твердую и плоскую поверхность.
2. Встаньте на весы, чтобы включить их.



3. Остановитесь, и дисплей трижды мигнет, показывая подтвержденное измерение веса. Затем шкала выключится через 10 секунд.

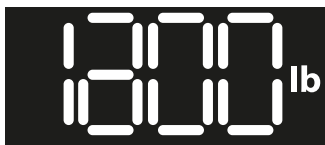

**Примечание:** если вы хотите провести повторное измерение, пожалуйста, полностью сойдите, а затем снова встаньте на весы.





### Сообщения с индикацией

**«Lo»** отображается при низком заряде батареи. Затем шкала выключится через несколько секунд. Пожалуйста, замените их новыми батарейками.



**«Ошибка»** отображается, когда шкала перегружена. Пожалуйста, немедленно снимите груз с весов, чтобы защитить датчики.





# ШАГ 01

## Загрузите приложение



Скачайте  
«HealthU»



Зарегистрируйтесь  
и заполните свои  
персональные  
данные




Установите  
батарейные  
элементы на  
весы

# ШАГ 02

## Сопряжение шкалы с приложением



Выберите свой  
зарегистрированный  
аккаунт

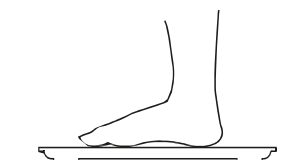

Встаньте  
на весы



Создайте  
пару  
в приложении

Соряжение происходит автоматически, как только Вы встанете на весы, в противном случае Вам следует подключить весы вручную в меню настроек приложения.

**Примечание:** Для работы устройства под управлением Android 6.0 потребуется включить доступ к местоположению.



## ШАГ

# 03

## Измерьте и проверьте отчет об анализе тела



Быстрый шаг по шкале для калибровки (может быть выполнен в любое время)



Продолжайте, пока номер на дисплее не стабилизируется




Проверьте отчет об анализе тела в приложении

## Что входит в комплект

**Ваш комплект Умных Весов включает в себя:**

- Умные Весы TELSC002
- Руководство по эксплуатации

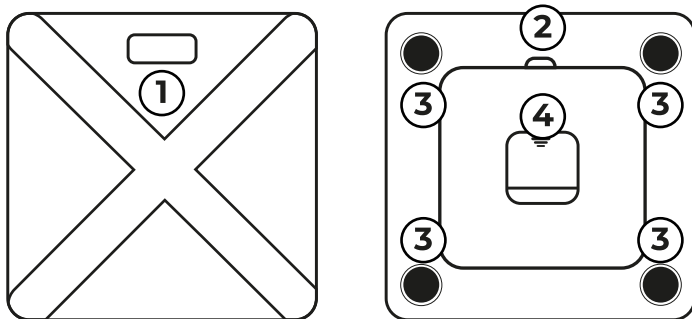

- ① Невидимый LED Дисплей
- ② Селектор единиц измерения - Используется для переключения между стандартными и метрическими единицами измерения
- ③ Датчики веса с высокой нагрузкой - Четыре самокалибрующихся датчика для обеспечения наиболее точных показаний
- ④ Порт батареи

### Вес и ИМТ

Вес можно просматривать как на дисплее, так и в приложении. Эта модель также использует информацию Вашего профиля для расчета индекса массы тела (ИМТ), который отображается в приложении/ Приложение позволяет вам вести историю этих показателей, чтобы Вы могли следить за Вашим прогрессом



## Спецификация

**Нагрузка:** максимум 180kg/400lb

**Градация:** 0.05kg/0.1lb

**Единицы измерения:** kg/lb

**Минимальный вес:** 3kg

**Питание:** 3 x AAA

**Рабочая температура:** от 0°C до 40°C)

**Рабочая влажность:** <90%RH

**Температура хранения:** от -20°C до 60°C)

## Техническое обслуживание и уход

**Просто** используйте мягкую влажную ткань или губку, чтобы вытереть пыль с весов.

**НЕ допускайте** попадания воды или жидкостей в электрические системы внутри.

**Для удаления пятен** или остатков используйте ткань со спиртом для протирания.

**Примечание:** Эти весы не являются водонепроницаемыми, **НЕ погружайтесь в воду.**



electronics



CE FCC



210-117092



Made in China